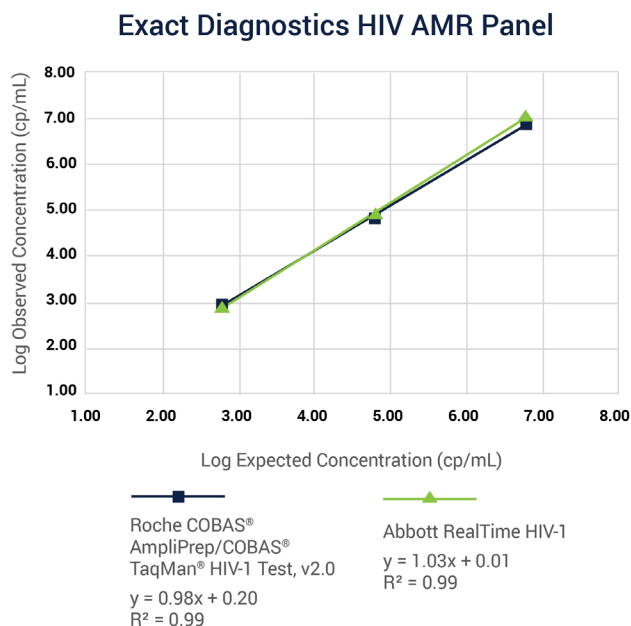


ZNAČAJKE UČINKOVITOSTI:

Tri jedinstvene serije proizvoda EDX HIV-1 AMR Panel testirane su u triplikatu u testovima navedenim na grafičkom prikazu u nastavku.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

ZNAČENJE SIMBOLA:

-  Kataloški broj
-  Broj serije
-  Za in vitro dijagnostičku primjenu
-  Biološki rizici
-  Datum isteka valjanosti
-  Nemojte ponovno upotrijebiti
-  Gornja temperaturna granica
-  Proizvođač
-  Oprez
-  Pogledajte upute za uporabu

LITERATURA:

¹3. međunarodni standard SZO-a za HIV-1 (10/152) Upute za uporabu. <http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

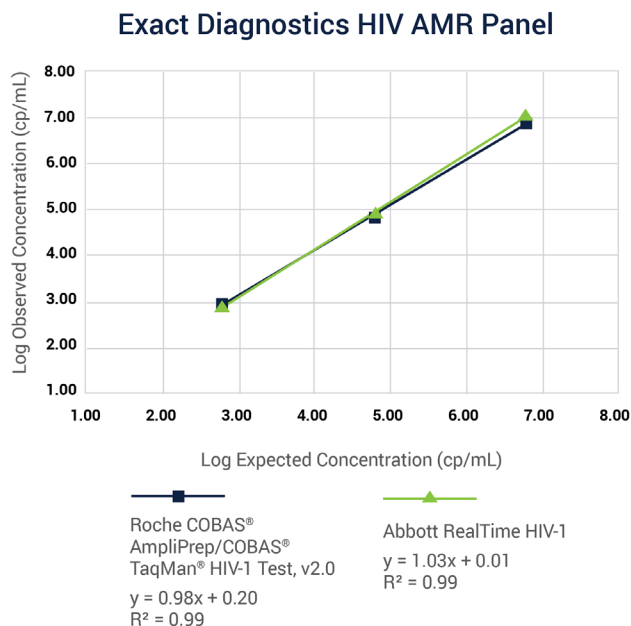
²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
SAD

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA:

Tři unikátní šarže EDX HIV-1 AMR Panel byly testovány ve třech provedeních napříč analýzami uvedenými v grafu níže.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

POUŽITÉ SYMBOLY:

-  Katalogové číslo
-  Číslo šarže
-  Pro diagnostické použití in vitro
-  Biologická rizika
-  Datum expirace
-  Nepoužívejte opakovaně
-  Horní teplotní limit
-  Výrobce
-  Upozornění
-  Čtěte návod k použití

ODKAZY:

¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

² Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission

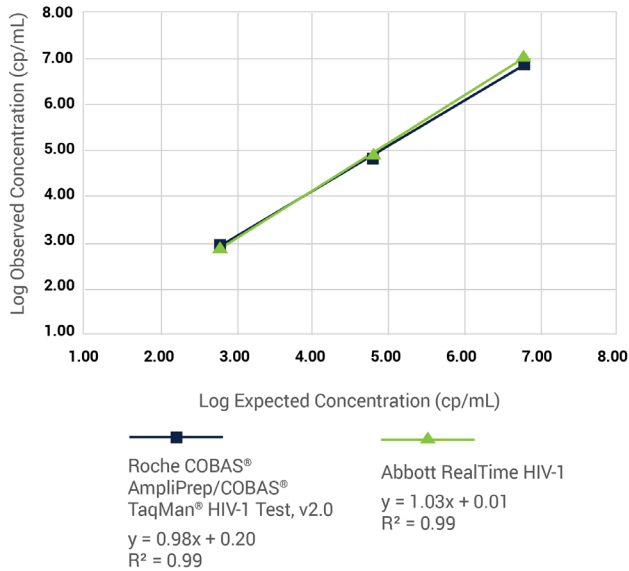


Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth, Texas 76107
Spojené státy

YDELSESEGENSKABER:











Tre unikke lot EDX HIV-1 AMR Panel blev testet i triplikat for de analyser, der er anført i diagrammet herunder.

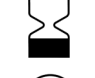Exact Diagnostics HIV AMR Panel



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.


SYMBOLFORKLARING:

-  REF Katalognummer
-  LOT Lotnummer
-  IVD Til in vitro-diagnostisk brug
-  Biologiske risici
-  Holdbarhedsdato
-  Må ikke genbruges
-  Øvre temperaturgrænse
-  Producent
-  Forsigtig
-  Se brugsanvisningen

REFERENCER:

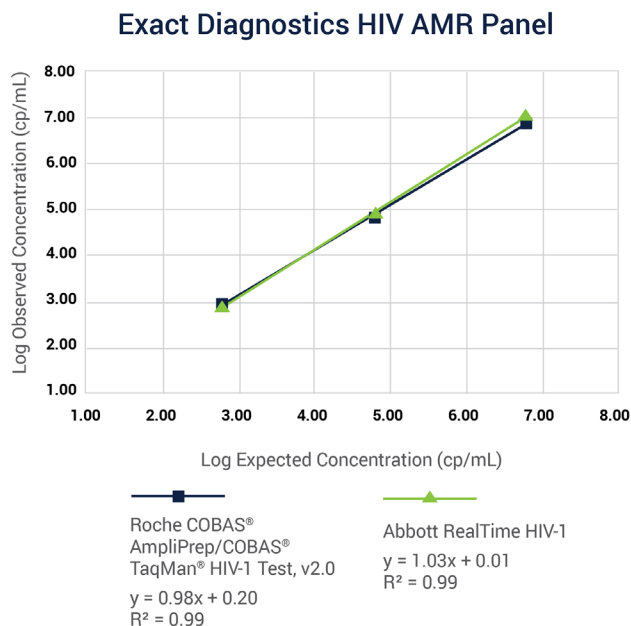
¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission


 Exact Diagnostics LLC
 3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
 Fort Worth TX 76107
 USA

SOORITUSNÄITAJAD

Alltoodud graafikul näidatud analüüside raames testiti kolme EDX HIV-1 AMR Panel'i partiid kolmes eksemplaris.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

TINGMÄRGID



Katalooginumber



Partii number



Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas



Bioloogiline oht



Kõlblikkusaja lõpp



Ärge kasutage korduvalt



Temperatuuri ülempiir



Tootja



Ettevaatust!



Tutvuge kasutusjuhistega

VIITED

¹ The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

² Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
Ameerika Ühendriigid

Tootja: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107


Abi saamiseks ja tellimuste esitamiseks võtke ühendust aadressil
customerservice@exactdiagnostics.com või telefonil **817-989-9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0022-ROW Rev. 01.00

LEISTUNGSMERKMALE:

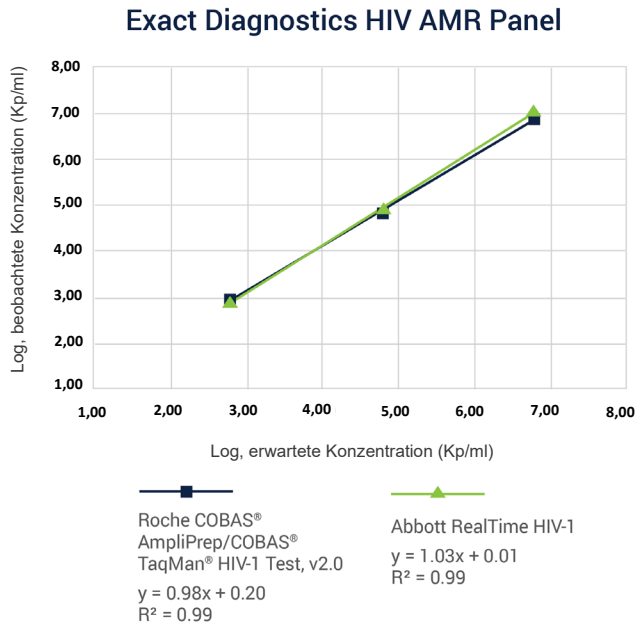Drei verschiedene Chargen des EDX HIV-1 AMR Panel wurden im Dreifachansatz über die in der folgenden Grafik dargestellten Assays hinweg getestet.



Die bereitgestellten Daten dienen nur zu Informationszwecken. Erwartete Ergebnisse sind vom Endanwender für das betreffende Assay-System festzulegen.

SYMBOLVERWEISE:


-  REF Katalognummer
-  LOT Chargennummer
-  IVD In-vitro-Diagnostikum
-  Biologische Risiken
-  Haltbarkeitsdatum
-  Nicht wiederverwenden
-  Obere Temperaturgrenze
-  Hersteller
-  Achtung
-  Gebrauchsanleitung beachten

LITERATUR:

¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

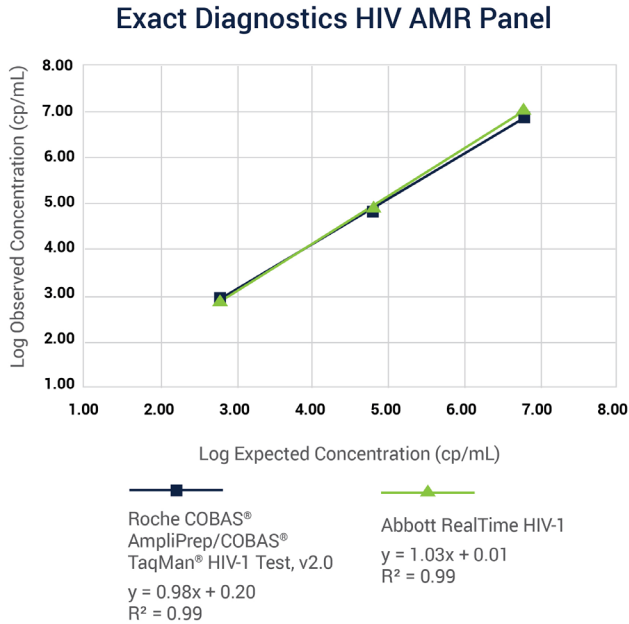
²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission

BIO-RAD und DROPLET DIGITAL PCR sind Marken von Bio-Rad Laboratories, Inc. in bestimmten Rechtssprechungen.


 Exact Diagnostics LLC
 3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
 Fort Worth TX 76107
 USA

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK:

Az EDX HIV-1 AMR Panel három egyedi tétele három példányban volt tesztelve az alábbi ábrán látható próbával.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

JELMAGYARÁZAT:

-  Katalógusszám
-  Tételszám
-  In vitro diagnosztikai felhasználásra
-  Biológiai kockázatok
-  Lejárati dátum
-  Ne használja újra.
-  Hőmérséklet felső határa
-  Gyártó
-  Figyelem
-  Olvassa el a Használati utasítást

IRODALOMJEGYZÉK:

¹A HIV-1 3. WHO nemzetközi szabványa (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
 3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
 Fort Worth TX 76107
 USA

Gyártó: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107

Ha segítségre van szüksége, vagy szeretne utánrendelni, lépjen velünk kapcsolatba:


customerservice@exactdiagnostics.com vagy **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0022-ROW Rev. 01.00

КАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИНОК:

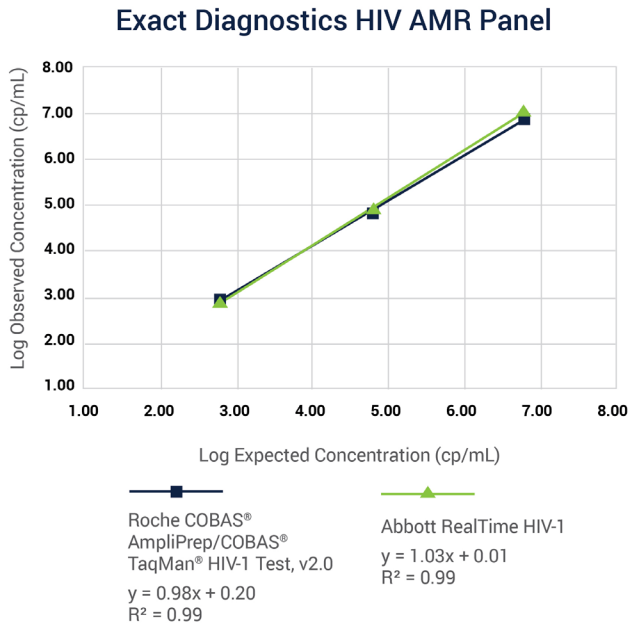Три уникатни серии на EDX HIV-1 AMR Panel беа тестирани во три примероци во анализи идентификувани во графиконот подолу.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

РЕФЕРЕНЦИ СИМБОЛИ:



Каталошки број



Број на серија



За ин витро дијагностичка употреба



Биолошки ризици



Рок на траење



Не смее повторно да се употребува



Горна граница на температура



Производител



Внимание



Прочитајте ги упатствата за користење

РЕФЕРЕНЦИ:

¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

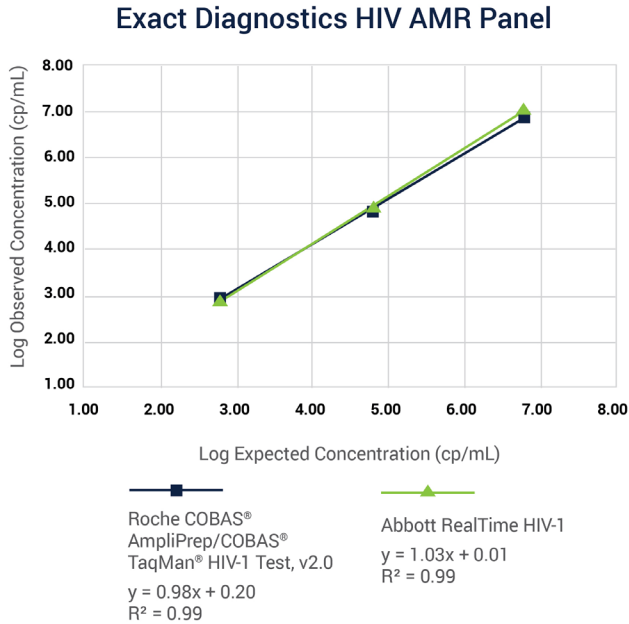
²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
 3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
 Fort Worth TX 76107
 Соединети Држави




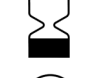



YTELSESEGENSKAPER:

Tre unike partier av EDX HIV-1 AMR Panel ble testet i tre eksemplarer på tvers av analysene identifisert i grafen nedenfor.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.


SYMBOLREFERANSER:

-  Katalognummer
-  Partinummer
-  Til in vitro-diagnostisk bruk
-  Biologiske risikoer
-  Utløpsdato
-  Må ikke gjenbrukes
-  Øvre temperaturgrense
-  Produsent
-  Forsiktig
-  Se bruksanvisningen

REFERANSER:

¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

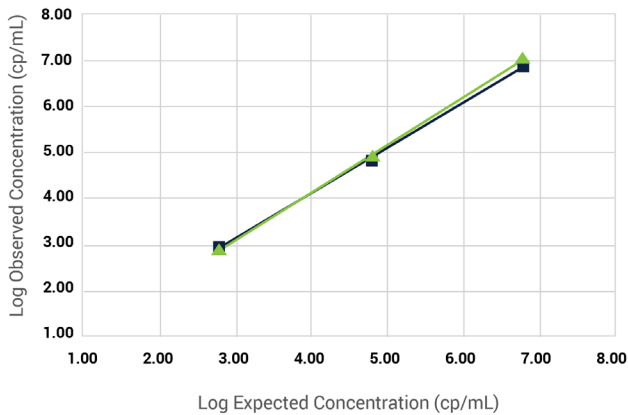
²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission


Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
United States

CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA:

Trzy unikalne serie panelu EDX HIV-1 AMR przetestowano w trzech powtórzeniach w oznaczeniach określonych na wykresie poniżej.

Exact Diagnostics HIV AMR Panel



Roche COBAS®
AmpliPrep/COBAS®
TaqMan® HIV-1 Test, v2.0
 $y = 0.98x + 0.20$
 $R^2 = 0.99$

Abbott RealTime HIV-1
 $y = 1.03x + 0.01$
 $R^2 = 0.99$

The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

-  Numer katalogowy
-  Numer serii
-  Do użytku w diagnostyce in vitro
-  Zagrożenie biologiczne
-  Data ważności
-  Nie używać ponownie
-  Górny limit temperatury
-  Producent
-  Ostrzeżenie
-  Zapoznać się z instrukcją użycia

LITERATURA:

¹The 3rd WHO International Standard for HIV-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
Stany Zjednoczone

Producent: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107, USA


W celu uzyskania pomocy i składania ponownych zamówień prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
customerservice@exactdiagnostics.com lub numerem telefonu **817.989.9262**.

www.exactdiagnostics.com

PI0022-ROW Rev. 01.00

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

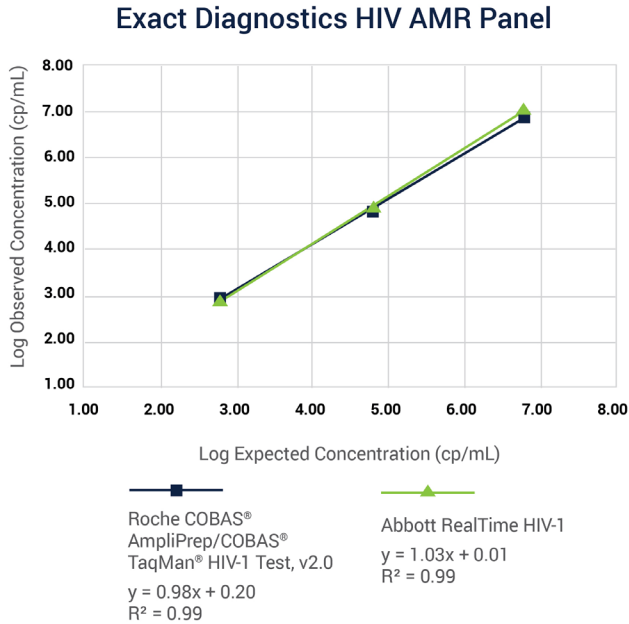Foram testados três lotes únicos de EDX HIV-1 AMR Panel em triplicado nos ensaios identificados no gráfico abaixo.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.


REFERÊNCIAS DOS SÍMBOLOS:

-  REF Número de catálogo
-  LOT Número do lote
-  IVD Para utilização em diagnóstico in vitro
-  Riscos biológicos
-  Data de validade
-  Não reutilizar
-  Limite de temperatura máximo
-  Fabricante
-  Precaução
-  Consulte as Instruções de Utilização

REFERÊNCIAS:

¹A 3.ª Norma Internacional da OMS para a VIH-1 (10/152) IU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

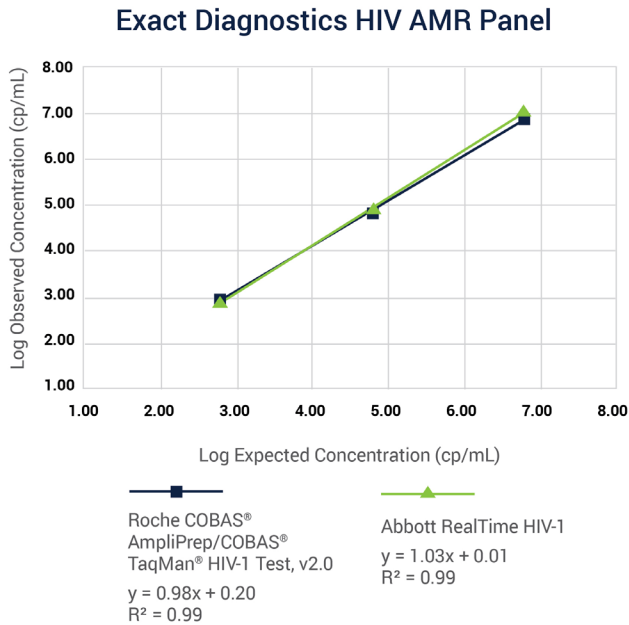
²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
EUA

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Три уникальные партии EDX HIV-1 AMR Panel были протестированы в трех экземплярах в рамках анализов, показанных на графике ниже.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Каталожный номер



Номер партии



Для диагностики в лабораторных условиях



Биологические риски



Дата истечения срока действия



Не использовать повторно.



Верхний температурный предел



Производитель



Предупреждение



Обратитесь к инструкции по применению.

СПРАВОЧНЫЕ ССЫЛКИ:

¹3-й международный стандарт ВОЗ для ВИЧ-1 (10/152) IFU.
<http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007
Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth TX 76107
United States


Изготовлено компанией: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107
За получением дополнительной информации и для размещения повторного заказа обращайтесь по адресу
customerservice@exactdiagnostics.com или по номеру **817.989.9262**.

www.exactdiagnostics.com

PI0022-ROW ред. 01.00

CHARAKTERISTIKY METÓDY:

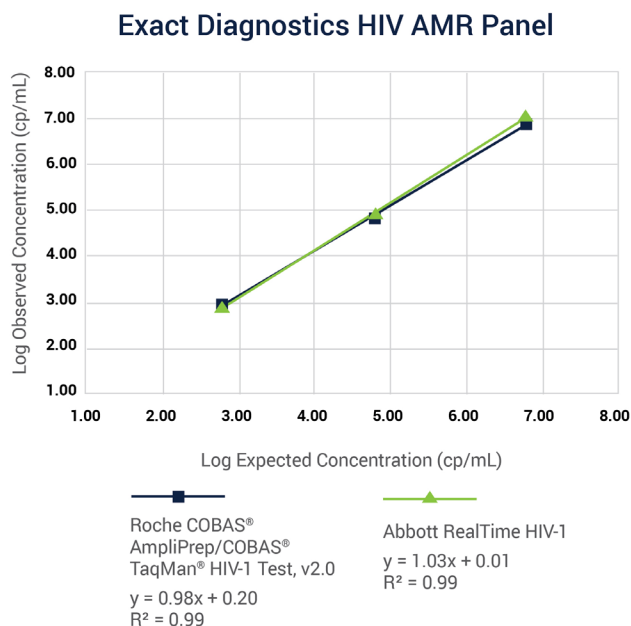V testoch označených v nižšie uvedenom grafe boli v troch vyhotoveniach otestované tri jedinečné dávky výrobku EDX HIV-1 AMR Panel.



The data provided is for informational use only. Expected results must be established by the end user for the particular assay system used.

REFERENČNÉ SYMBOLY:



Katalógové číslo



Číslo šarže



Určené na diagnostiku in vitro



Biologické riziká



Dátum expirácie



Nepoužívajte opakovane



Maximálna teplota



Výrobca



Pozor



Pozri návod na použitie

LITERATÚRA:

¹3. medzinárodná norma Svetovej zdravotníckej organizácie pre HIV-1 (10/152) IFU. <http://www.nibsc.org/documents/ifu/10-152.pdf>

²Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission



Exact Diagnostics LLC
 3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
 Fort Worth TX 76107
 Spojené štáty

